

ALMOFADAS SUB-DIGITAIS

com Epithelium™

INDICAÇÕES

Dedos do pé em martelo, dedos do pé em garra, calos pulpares, pés cavos.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Não utilizar sobre uma lesão cutânea.
- Casos de pessoas que sofrem de arterite, diabetes, neuropatia dos membros inferiores ou úlceras: pergunte ao seu médico ou podologista, em seguida, monitorizar o seu pé durante a utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- Lavar antes da 1ª utilização.
- Segurar a almofada, colocando-a com a face curva virada para cima.
- Passar o elástico à volta do 3º dedo do pé, de modo a que o 2º dedo fique apoiado sobre a parte mais larga da almofada.
- Posicionar a almofada no espaço existente sob os dedos do pé.
- Calçar uma meia ou "collant", para um melhor suporte.

FUNCIONALIDADES

- Este dispositivo permite que os dedos do pé se alonguem confortavelmente e deste modo, evita a posição dos dedos "em garra". Limita a formação de calos pulpares e dorsais que, normalmente, estão associados a esta patologia.
- Devido à sua forma ergonómica, a almofada adapta-se na perfeição ao espaço existente sob os dedos do pé. Fabricado em gel de Epithelium™, coberto de tecido, torna-se extremamente confortável.

CONSERVAÇÃO

- Lavar após a utilização na máquina de lavar a 30°C, no interior do saco de lavagem fornecido para o efeito, ou lavar à mão (sem esfregar).
- Descarte e substitua o dispositivo, caso ocorram danos no tecido ou nas costuras.
- Deixar secar naturalmente.

COMPOSIÇÃO: 90 % silicone, 10 % de tecido em poliamida/elastano.

Em caso de dor ou qualquer outra reação fora do normal, consulte o seu médico. Quaisquer incidentes graves envolvendo o dispositivo, devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente.

A empresa "MILLET Innovation", não pode ser responsabilizada no caso de utilização que não esteja em conformidade com as recomendações do fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2003.



Lavável à máquina a 30°C.



Não engomar nem a vapor.



Não limpar a seco.



No lavar en seco.



No secar en secadora.



Não usar cloro.



Não secar à máquina.



Ver embalagem.



Lavable a máquina a 30°C.




No planchar, ni siquiere a vapor.



No lavar en seco.



No secar en secadora.

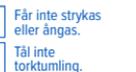

No secar en secadora.



No secar en secadora.



No secar en secadora.

RATONCILLOS SUBDIGITALES

con Epithelium™

INDICACIONES

Evitar la formación de callos pulpares en los dedos en martillo e impedir la fijación de los dedos garra.

CONTRAINDICACIONES

- No lleve sobre una lesión cutánea.
- En el caso de las personas que sufren arteritis, diabetes, neuropatías de los miembros inferiores o de úlceras: deben solicitar consejo a su médico o podólogo, y a continuación, mantener la vigilancia de su pie durante su uso.

PRECAUCIONES DE USO

- Lavar antes del primer uso.
- Tome el ratoncillo subdigital sosteniéndolo con la cara abombada hacia arriba.
- Pase la goma alrededor del tercer dedo, de manera que el segundo dedo quede apoyado sobre la parte más ancha del ratoncillo subdigital.
- Coloque el ratoncillo subdigital en el espacio situado bajo los dedos de los pies.
- Póngase el calcetín o la media por encima para una mejor sujeción.

FUNCIONES

- Hechas de Epithelium™, los ratoncillos subdigitales permiten estirar cómodamente los dedos de los pies que tienen tendencia a plegarse. Impiden la fijación de los dedos garra y limitan la formación de los callos pulpares y dorsales.
- Gracias a su forma ergonómica y a las asombrosas propiedades viscoelásticas del Epithelium™, las tiras se adaptan perfectamente al espacio situado bajo los dedos de los pies.

MANTENIMIENTO

- Lavar después de usar en la lavadora a 30°C en la red de lavado incluida o a mano (sin frotar).
- Deseche y reemplace el dispositivo en cuanto se note una degradación del tejido o de las costuras.
- Deje secar sal aire libre.

COMPOSICIÓN: 90 % de silicona, 10 % de tejido de poliamida/elastano.

En caso de dolor o cualquier otra reacción inusual, consulte a su médico. Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad sanitaria competente.

MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. O français é o idioma de referência. Marcação CE inicial: 2003.

FORFODSPELOTTE

med Epithelium™

INDIKATIONER

Forebygger ligtorner på spidsen af hammertæer, samt modvirker klotå.

KONTRAINDIKATIONER

- Må ikke bruges i tilfælde af hudlæsioner.
- Hvis det drejer sig om personer, der lider af arteritis, diabetes, eller neuropati i underekstremiteterne eller bensår: Rådspørg en læge eller en fodlæge og hold opsyn med foden under anvendelse af tåbeskyttelsen.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- Vask før første anvendelse.
- Tag fat om indlægget, således at den hvælvede side vender opad.
- Sæt elastikken omkring den 3. tå, således at den 2. tå hviler på den bredeste del af indlægget.
- Placer indlægget i hulrummet under tæerne.
- Tag strømper på for at holde indlægget på plads.

FUNKTIONSEVNE

- Forfodsindlæggene, fremstillet i Epithelium™ gel, hjælper med på en behagelig måde at rette tæer ud, som har tendens til at bøjes. De modvirker at tæerne stivner i klo og begrænser dannelsen af ligtorner på tåryg og tåspids.
- I kraft af deres ergonomiske form og Epithelium™ gelens bemærkelsesværdige viskoelastiske egenskaber tilpasser indlæggene sig perfekt til hulrummet under tæernes grundled.

VEDLIGEHOLDELSE

- Vask i vaskemaskine ved 30°C i den medfølgende vaskepose eller i hånden (uden at gnide).
- Produktet skal kasseres og udskiftes hvis der opstår skader i stoffet eller i sømmen.
- Lad lufttørre.

SAMMENSÆTNING: 90 % silikon, 10 % stof i polyamid/elastan.

I tilfælde af smerter eller andre utilsigtede reaktioner, skal egen læge kontaktes. Alle utilsigtede hændelser, der er forårsaget af produktet, skal rapporteres til producenten og den relevante sundhedsmyndighed.

MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindeligt CE-mærkning: 2003.

TÅLEDKUDDAR

med Epithelium™

ANVISNINGAR

Förhindrar liktorner på hammartår och motverkar krökta tår.

VARNINGSTEXT

- Får inte användas på skadad hud.
- Personer som lider av artrit, diabetes, muskelatrofi i benen eller åderbråck bör rådfråga sin läkare eller fotvårdsspecialist samt övervaka foten under användningen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Bör tvättas innan den första användningen.
- Tag ut kudden och håll den med den välvda sidan uppåt.
- Fäst resåren runt den tredje tån så att den andra tån får stöd mot tåledskuddens tjockaste del.
- Placera kudden under tårna.
- Ta på dig strumpor, knästrumpor eller strumpyxor utanpå för bästa möjliga stöd.

FUNKTIONER

- Tåledskuddar tillverkade av Epithelium™ som gör att tår som tenderar att kröka sig kan sträckas ut på ett behagligt sätt. Kuddarna motverkar klotår och begränsar uppkomsten av liktorner på tåspetsarna och tårnas ovasida.
- Tåledskuddarna av Epithelium™ är ergonomiskt utformade, har avancerade viskoelastiska egenskaper och formar sig därför perfekt under framfoten.

UNDERHÅLL

- Tvätta efter användning vid 30°C i medföljande tvättnät eller för hand (varsamt).
- Kassera genast och ersätt med ny produkt om det uppstår skador på material eller sömmar.
- Låt lufttorka.

SAMMANSÄTTNING: 90 % silikon, 10 % polyamid-/elastanväv.

Kontakta läkare vid smärta eller annan onavlig reaktion. Alla allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren och inköpsställe.

Företaget MILLET Innovation kan inte ställas till svars om tillverkarens användningsråd inte följs. Referensspråk är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2003.



Kan maskintvättas i 30°C.



Får inte strykas eller ångas.



Får inte kemtvättas.



Får inte torktumling.



Se förpackningen.

Epithelium™ -GEELISTÄ VALMISTETUT VASARAVARPAIDEN OIKAISIJAT

KÄYTTÖTARKOITUS

Enkäistä kovettumien syntyminen vasaravarpaisiin ja estää koukkuvarpaiden syntyminen.

VASTA-AIHEET

- Älä käytä haavaisella tai vahingoittuneella iholla.
- Henkilöt, jotka kärsivät valtimotulehduksista, diabeteksesta, alaraajojen neuropatiasta tai säärhaavoista: kysy neuvoa lääkäriltä tai jalkahoitajalta ja tarkkaile jalkoja käytön aikana.

VAROTOIMENPITEET

- Pestävä ennen käyttöönottoa.
- Ota oikaisija käteen kupera puoli ylöspäin.
- Pujota lenkki 3. varpaan ympärille niin, että 2. varvas tukeutuu oikaisijan paksuinta osaa vasten.
- Aseta oikaisija varpaiden alla olevaan tilaan.
- Pue sukka tai sukkahousut oikaisijan päälle varmistamaan sen pysyminen paikallaan.

TOIMINTA

- Epithelium™-geelistä valmistettujen vasaravarpaan oikaisijoiden avulla koukistamaan pyrkivät varpaat suorituvat miellyttävällä tavalla. Oikaisijat ehkäisevät koukkuvarpaiden syntymistä ja vähentävät kovettumien ja liikavarpaiden muodostumista.
- Ergonomisen muotonsa ja Epithelium™ -geelin viskoelastisten ominaisuuksien ansiosta oikaisijat mukautuvat täydellisesti varpaiden alapuoliseen tilaan.

HOITO

- Pese koneessa 30°C lämpötilassa mukana olevassa pesupussissa tai käsin (ei saa hangata).
- Hävitä heti laite ja vaihda se uuteen, jos kankaassa tai saumoissa näkyy vaurioita.
- Anna kuivua itsestään.

KOOSTUMUS: 90 % silikonია, 10 % polyamidi-/elastanikangasta.

Ota yhteyts lääkäriin, jos sinulla ilmenee kipua tai jokin muu epätavallinen reaktio. Kaikista laitteeseen liittyvistä merkittävistä tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja asianmukaisesti terveystyösuojaukselle.

MILLET Innovation ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä. Ranskan on viitattu kielii. Alkuperäinen CE-merkintä: 2003.



Konepesu 30°C.



Ei silitystä tai höyryä.



Ei koneellista kuivausta.



Katso pakkausta.

BARRETTES SOUS-DIAPHYSAIRES à l'Epithelium™

INDICATIONS

Orteils en marteau, orteils en griffe, cors pulpaires, pieds creux.

CONTRE INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas de personnes souffrant d'artérite, de diabète, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères: demander conseil à votre médecin ou à votre podologue, puis surveiller votre pied pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Laver avant la 1^{ère} utilisation.
- Prendre la barrette en la tenant face bombée sur le dessus.
- Passer l'élastique autour du 3^{ème} orteil de façon à ce que le 2^{ème} orteil se trouve appuyé sur la partie la plus large de la barrette.
- Positionner la barrette dans l'espace situé sous les orteils.
- Enfiler la chaussette, le bas ou le collant par-dessus pour un meilleur maintien.

FUNCTIONNALITÉS

- Ce dispositif permet aux orteils de s'allonger confortablement et d'éviter ainsi la fixation des orteils en griffe. Il limite la formation de cors pulpaires et dorsaux qui sont souvent associés à cette pathologie.
- De par sa forme, la barrette s'adapte parfaitement à l'espace situé sous les orteils: Elle est réalisée dans un matériau recouvert de tissu, au contact très agréable, appelé Epithelium™.

ENTRETIEN

- Laver après utilisation en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni ou à la main (sans frotter).
- Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de dégradation du tissu ou des coutures.
- Laisser sécher naturellement.

COMPOSITION : 90 % silicone, 10 % tissu polyamide/élasthanne.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2003.

REF 10634-N - 05/2023



HAMMER TOE CUSHIONS

with Epithelium™

INDICATIONS

Hammer, claw toes, corns at the end of the toes...

CONTRA-INDICATIONS

- Do not use on a skin lesion.
- Persons with arthritis, diabetes, peripheral neuropathy, or foot ulcers: consult your physician or chiroprapist before application and monitor your foot during use.

PRECAUTIONS FOR USE

- Wash before first use.
- Hold the Hammer toe Cushion by the rounded top part.
- The elastic strap slips over the third toe. The largest part of the Cushion needs to be under the second toe.
- Place the Hammer toe Cushion in the free space at the base of the toes.
- Then slip on socks, stockings or tights to secure the Cushion in the proper position.

WHAT IT IS USED FOR

- The Hammer toe cushion makes the toes feel comfortable by maintaining them firmly in good position and thus limits the formation of corns on the tip.
- Its shape allows it to adapt to the space under the toes without causing any discomfort. The Hammer toe Cushion is filled with a material, covered by soft fabric, called Epithelium™.

LASTING QUALITY

- Washing after use at 30°C in the washing bag supplied or wash by hand (without rubbing).
- Discard and replace the device as soon as fabric or seam damages occur.
- Air dry. Do not iron.

COMPOSITION: 90% silicone, 10% polyamide/elastane fabric.

In case of pain or any other unusual reaction, contact your doctor. Any major incidents involving the device must be reported to the manufacturer and the relevant health authority.

Millet Innovation cannot be held responsible for failure to use the product in accordance with the manufacturer's recommendations. French is the reference language. CE initial marking: 2003.

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Machine washable at 30°C. | Do not iron or steam. | Do not dry clean. |
| Do not bleach. | Do not tumble dry. | See packaging. |

TEENSTAAFJES met Epithelium™

INDICATIES

Voorkomen van likdoorns op de toppen van hamertenen en vorming van klauwtenen.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Personen die lijden aan arthritis, diabetes, neuropathie van de onderste ledematen of zweren: vraag raad aan uw arts of podoloog, vervolgens uw voet opvolgen gedurende het gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Wassen vóór 1^{ste} gebruik.
- Pak het staaftje vast met de bolle kant naar boven.
- Installeer het elastiek rond de 3e teen, zodat de 2e teen op het breedste gedeelte van het staaftje drukt.
- Plaats het staaftje in de ruimte onder de tenen.
- Doe de sok, de kous of de panty er over aan voor een betere bevestiging.

FUNCTIONALITEIT

- De staaftjes voor onder de diafyse zijn gemaakt van Epithelium™. Hierdoor worden tenen die de neiging hebben om te krommen comfortabel gestrekt. Zij voorkomen de vorming van klauwtenen en beperken het ontstaan van likdoorns op de toppen of gewrichten van de tenen.
- Dankzij de ergonomische vorm en de opmerkelijke visco-elastische eigenschappen van Epithelium™ passen de staaftjes zich perfect aan de ruimte onder de tenen aan.

ONDERHOUD

- Wassen na gebruik bij 30°C in de bijgeleverde waszak of met de hand wassen (niet schrobben).
- Vervang het product zodra het textiel of de naden slijtage vertonen.
- Aan de lucht laten drogen.

SAMENSTELLING: 90% siliconen, 10% polyamide/elasthaan weefsel.

Bij pijn of andere ongebruikelijke reacties, neem contact op met uw arts. Elk ernstig incident dat verband houdt met het product moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteit.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2003.

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Machine wasbaar op 30°C. | Niet strijken (kein Dampf). | Geen droogkuis. |
| Niet bleken. | Niet drogen in de droogtrommel. | Zie verpakking. |

ZEHENDRUCKSCHUTZPOLSTER aus Epithelium™

INDIKATION

Zur Vorbeugung von Hühneraugen auf Hammerzehen und zur Vermeidung der Versteifung von Krallenzehen.

GEGENANZEIGEN

- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Bei Arteriiitis, Diabetes, Neuropathie der unteren Gliedmaßen oder Ulcera: fragen Sie Ihren Arzt, und beobachten Sie Ihren Fuß während der Verwendung.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der ersten Anwendung waschen.
- Halten Sie das Zehenpolster mit der gewölbten Seite nach oben.
- Streifen Sie den Gummiband-Ring über den mittleren Zeh, sodass der zweite Zeh auf der breitesten Stelle des Zehenpolsters aufliegt.
- Platzieren Sie das Zehenpolster unter den Zehen.
- Für einen besseren Halt, ziehen Sie einen Strumpf oder eine Strumpfhose darüber.

EIGENSCHAFTEN

- Diese Zehenpolster aus Epithelium™ ermöglichen ein bequemes Strecken von Zehen mit Tendenz zu Fehlstellungen (Hammerzehen). Sie vermeiden die Versteifung von Krallenzehen und verringern die Bildung von Hühneraugen an den Zehenspitzen und auf den Zehen.
- Aufgrund ihrer ergonomischen Form und der hohen Viskoelastizität von Epithelium™ passen sich die Zehenpolster perfekt an den Raum unter den Zehen an.

REINIGUNG

- Nach Gebrauch in der Waschmaschine bei 30°C waschen in dem mitgelieferten Waschenetz oder von Hand waschen (nicht reiben).
- Das Produkt entsorgen und ersetzen, sobald eine Abnutzung des Gewebes oder der Nähte auftritt.
- An der Luft trocknen lassen.

ZUSAMMENSETZUNG: 90% Silikon, 10% Polyamid/Elasthan.

Bei Schmerzen oder einer anderen ungewöhnlichen Reaktion wenden Sie sich an Ihren Arzt. Schwere Zwischenfälle, die in Zusammenhang mit dem Produkt stehen, sind dem Hersteller und der zuständigen Gesundheitsbehörde zu melden.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2003.

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Maschinenwäsche 30°C. | Nicht bügeln (kein Dampf). | Nicht chemisch reinigen. |
| Bleichen mit Chlor nicht erlaubt. | Nicht maschinenrocknen. | Siehe Verpackung. |

BARRETTE SOTTO-DIAFISARIE all'Epithelium™

INDICAZIONI

Per prevenire i calli sulle dita a martello ed evitare le dita ad artiglio.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare su una lesione cutanea.
- Per le persone che soffrono di arterite, diabete, neuropatia degli arti inferiori o ulcere: chiedere consiglio al vostro medico o al vostro podologo, e controllare il piede durante l'utilizzo.

MISURE PRECAUZIONALI

- Lavare prima del primo utilizzo.
- Prendere la barretta tenendola dalla parte bombata sulla parte superiore.
- Passare l'elastico attorno al terzo dito in modo tale che il secondo dito si trovi appoggiato alla parte più larga della barretta.
- Posizionare la barretta nello spazio situato sotto le dita.
- Infilare la calza o il collant sopra, per una migliore stabilità.

FUNZIONALITÀ

- Le barrette sotto-diafisarie in Epithelium™, permettono di allungare comodamente le dita con tendenza a ripiegarsi. Evitano così la formazione di dita ad artiglio e limitano la formazione di calli dorsali e ai polpastrelli.
- Grazie alla loro forma ergonomica e alle straordinarie proprietà viscoelastiche dell'Epithelium™, le barrette si adattano perfettamente alla zona situata sotto le dita dei piedi.

MANUTENZIONE

- Lavare dopo l'uso in lavatrice al 30°C nella retina di lavaggio in dotazione, o a mano (senza sfregare).
- Gettare e sostituire il dispositivo in presenza di danni a tessuto o cuciture.
- Lasciare asciugare naturalmente.

COMPOSIZIONE: 90% silicone, 10% poliammide/elastan.

In caso di dolore o di qualsiasi altra reazione anomala, contattare il medico. Eventuali incidenti gravi attinenti al prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità sanitarie competenti.

La società MILLET Innovation declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante. Il francese è la lingua di riferimento. Marcatura CE originale: 2003.

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| Lavabile in lavatrice a 30°C. | Non stirare e non trattare con vapore. | Non lavare a secco. |
| Non sottoporre a candeggio. | Non asciugare in asciugatrice. | Vedere la confezione. |

TÅLEDDSPUTER med Epithelium™

INDIKASJONER

Forebygger liktørner på hammertær og motvirker klotær.

KONTRAIKASJONER

- Må ikke brukes på lesjoner i huden.
- For personer som lider av arteritt, diabetes, nevropati i bena eller ulcus: be lege eller fotterapeut om råd, og hold øye med foten din under bruk.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

- Må vaskes før bruk.
- Hold puten med den buete siden opp.
- Fest strikken rundt den tredje tåen slik at tå nummer to hviler på den tykkeste delen av tåleddsputen.
- Plasser puten under tærne.
- Bruk sokker, strømper eller strømpebukse utenpå for å få best mulig støtte.

FUNKSJONER

- Tåleddsputene med Epithelium™ gjør at tær som har en tendens til å krøke seg sammen kan strekkes ut på en komfortabel måte. Putene motvirker klotær og reduserer dannelsen av liktørner på tærne.
- Tåleddsputene med Epithelium™ er ergonomisk utformet med avanserte viskoelastiske egenskaper og vil derfor forme seg perfekt under forfoten.

VEDLIKEHOLD

- Vaskes i maskin etter bruk, ved 30 °C i den medleverte vaskeposen, eller for hånd (uten å gni).
- Kasser og bytt ut produktet straks hvis det er blitt skadet på stoffet eller på sømmene.
- La lufttørke.

SAMMENSETNING: 90% silikon, 10% stoff av polyamid/elastan.

Hvis det oppstår smerter eller andre uvanlige reaksjoner, må du kontakte legen din. Alvorlige hendelser i forbindelse med bruken av produktet skal man melde fra om, til produsenten og til den kompetente myndigheten.

Firmaet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig EU-merking: 2003.

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kan vaskes i maskin ved 30°C. | Må ikke strykes eller dampes. | Må ikke tørkes i tørketrommel. |
| Må ikke vaskes i klor eller klorox. | Må ikke tørkes i maskin. | Se emballasjen. |

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ με Epithelium™

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προλαμβάνουν το σχηματισμό σκληρών κάλων στα δάχτυλα των ποδιών που πάσχουν από σφυροδακτυλία και αποτρέπουν τη μοιμοποίηση της γαμψοδακτυλίας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλοιώσεων στο δέρμα.
- Περίπτωση ατόμων με αρθριτίδα, διαβήτη, νευροπάθεια των κάτω άκρων ή εξέλκωμα: ζητήστε συμβουλές από τον ιατρό ή τον ποδολόγο σας και στη συνέχεια παρακολουθείτε το πόδι σας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Να πλυθεί πριν από την 1η χρήση.
- Πάρτε στα χέρια σας το μαξιλαράκι κρατώντας το με την καμπυλωτή πλευρά στραμμένη προς τα επάνω.
- Περάστε το λαστιχάκι γύρω από το 3ο δάχτυλο του ποδιού, έτσι ώστε το 2ο δάχτυλο να ακουμπά στο πλατύτερο τμήμα.
- Τοποθετήστε το μαξιλαράκι στο κενό που υπάρχει κάτω από τα δάχτυλα του ποδιού.
- Φορέστε από πάνω κάλσα ή κάσόν, ώστε το μαξιλαράκι να στερεωθεί στη θέση του.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Φτιαγμένα από Epithelium™, τα ειδικά μαξιλαράκια τοποθετούνται κάτω από τη διάφηση και επιτρέπουν να τεντώνονται με ευκολία τα δάχτυλα των ποδιών που έχουν την τάση να αναδιπλώνονται. Αποτρέπουν τη μοιμοποίηση της γαμψοδακτυλίας και περιορίζουν τη δημιουργία σκληρών κάλων και κάλων στις αρθρώσεις.
- Χάρη στο εργονομικό τους σχήμα και στις εξαιρετικές ιεωδοελαστικές ιδιότητες του Epithelium™, τα μαξιλαράκια εφαρμόζονται άψογα στο κενό που υπάρχει κάτω από τα δάχτυλα των ποδιών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μετά από τη χρήση, πλύντε στο πλυντήριο στους 30°C μέσα στο δίχτυ που παρέχεται ή πλύντε στο χέρι (χωρίς τρίψιμο).
- Απορρίψτε το προϊόν και αντικαταστήστε το αν παρατηρήσετε βλάβη στο πλέγμα ή τις ραφές.
- Αφήστε να στεγνώσει ελεύθερα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 90% σιλίκονη, 10% ύφασμα πολυαμιδίου/ελαστίνης.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αν αισθανθείτε πόνο ή παρουσιάσετε κάποια ασυνήθιστη αντίδραση. Κάθε σοβαρό συμβάν που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Η εταιρεία MILLET Innovation δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο αντίθετο προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική σήμανση C: 2003.

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C. | Δεν αιδερώνεται, ούτε και με ατμό. | Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθαρίσµα. |
| Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό. | Δεν στεγνώνεται στο στεγνωτήριο. | Δείτε συσκευασία. |