

DANSKepitact®
SPORT**TÅBESKYTTELSER MOD BLÅ NEGLE**

EPITHELIUMTACT 02

INDIKATIONER: Tåbeskyttelser mod blå negle.**KONTRAINDIKATIONER:**

- Må ikke bruges over et ubeskyttet sår.
- Vedrørende personer som lider af arthritis, diabetes, neuropati i underkæbeteerne eller bensår: Brug aldrig produktet på et sår, hold opsyn med foden under brug og rådspørg under alle omstændigheder din læge eller din fodlæge.

FORSIGTIGHEDSREGLER:

- Disse beskyttelser er beregnet til **forebyggelse**. De er også perfekte til at blive brugt, når der allerede er en blå negl.
- Beskyttelserne skal bruges på en ren og tør hud. Vask før første anvendelse.
- Tåbeskytteren er lettere at sætte på, hvis man holder den omvendt ved tåspidsen og dernæst ruller den op over tåen.
 - Klip ikke tåbeskytteren kortere, da det vil gøre den mindre solid.
 - Tag tåbeskytteren af hver aften for at undgå risiko for maceration.
 - Læg tåbeskyttelsen ned i den medfølgende metalpose, indtil næste gang den skal bruges.

FUNKTIONSEVNE:

EPITHELIUMTACT 02 tåbeskyttelser mod blå negle består af en 1 mm tyk selvkøbende silikonegel, hvis viskoelastiske egenskaber er meget lignende hudens. På denne måde vil beskyttelserne fordele tryk og absorbere små stød og slag ved spredning af energien i gelen og således forebygge enhver risiko for dannelse af blå negle eller vabler. På denne måde lindrer de smerte og giver mulighed for at fortsætte sportsudøvelsen uden at blive svækket.

VEDLIGEHDLELSE:

Beskyttelserne kan vaskes i sæbevand. Må ikke skrubbes og skal tørre naturligt.

SAMMENSÆTNING: 82% silikone, 18% stof i polyamid/elastan.

Materialerne har været genstand for alle påkrævede, lovbestemte tests ifølge standarden ISO 10 993-1 om produkter, som er i kontakt med huden. Hvis der trods indtræffe en hændelse, stands straks brugen af produktet og underret MILLET Innovation herom.

MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindeligt CE-mærkning: 2014.

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Skal håndvaskes. | <input checked="" type="checkbox"/> Tåler ikke strygning eller damp. | <input checked="" type="checkbox"/> Tåler ikke kemisk rensning. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tåler ikke klørblegning. | <input checked="" type="checkbox"/> Tåler ikke tørrumbler. | <input checked="" type="checkbox"/> Se emballagen. |

SVENSKAepitact®
SPORT**BLÅNAGELSSKYDD**

EPITHELIUMTACT 02

INDIKATIONER: Blånegelsskydd.**KONTRAINDIKATIONER:**

- Använd inte på öppet sår.
- Personer som lider av artärinflammation, diabetes, muskelatrofi i benen eller åderbräcksår får aldrig använda produkten på ett sår, och bör övervaka foten under användningen. Rådfråga en läkare eller fotvårdsspecialist.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Dessa skydd ska användas som **en förebyggande åtgärd**. De kan även med fördel användas när en blånegel redan har bildats. Skydden ska användas på ren och torr hud. Bör tvättas innan den första användningen.
- Sätt på skyddet genom att placera det ut och in på ändan av tån. Rulla ner det.
 - Korta inte av skyddet eftersom det då håller sämre.
 - Ta alltid av skyddet på kvällen för att förhindra maceration.
 - Förvara skyddet i den metalliserade påsen tills det ska användas nästa gång.

FUNKTIONER:

Blånegelsskydden EPITHELIUMTACT 02 består av ett extremt hållbart 1 mm tjockt silikongel vars viskoelastiska egenskaper liknar hudens. Skydden fördelar trycket och absorberar mikrostötar genom att gelet sprider energin och på så sätt förebygger risken för blåneglar och skavsår. De lindrar smärtan så att du kan fortsätta att utöva din idrott och prestera bra.

SKÖTSEL:

Skydden kan tvättas med tvål och vatten. Gnugga inte. Låt lufttorka.

SAMMANSÄTTNING: 82% silikon, 18% polyamid/elastanväv.

Materialen har genomgått alla tester som krävs i standarden ISO 10 993-1 för produkter som kommer i kontakt med huden. Om ett problem ändå skulle uppstå, bör du genast sluta använda produkten och underrätta företaget MILLET Innovation.

Företaget MILLET Innovation kan inte ställas till svars om tillverkarens användningsråd inte följs. Referensspråk är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2014.

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kan handtvättas. | <input checked="" type="checkbox"/> Får inte strykas eller ångas. | <input checked="" type="checkbox"/> Får inte kemtvättas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Använd inte blekmedel. | <input checked="" type="checkbox"/> Tål inte torktumlning. | <input checked="" type="checkbox"/> Se förpackningen. |

SUOMALAINENepitact®
SPORT**SINISTEN KYNSIEN SUOJAT**

EPITHELIUMTACT 02

KÄYTTÖAIHEET: Sinisten kynsien suojat.**KÄYTÖN VASTA-AIHEET:**

- Ei saa käyttää suojaamattoman haavan päällä.
- Henkilöt, jotka kärsivät valtimotulehduksesta, diabeteksesta, alaraajojen neuropatiasta tai säärihaavoista: älä koskaan käytä tuotetta haavalla tai diabeteksen aiheuttamalla haavaumalla, seuraa jalkaa koko käytön ajan ja pyydä lääkäriin tai jalkahoitajan neuvoa.

VAROITUSMERKITYKSET:

- Näitä suojaia käytetään **ehkäisyssä**. Niitä voi käyttää myös, jos kynsi on jo muuttunut siniseksi.
- Suojaia tulee käyttää puhtaalla ja kuivalla iholla. Pestävä ennen käyttöönottoa.
- Kun laitat tuotteen paikoilleen, aseta se nurinpäin varpaan päähän ja kierrä sitten vähitellen auki.
 - Älä lyhennä tuotetta, se heikentää sitä.
 - Ota suoja pois joka ilta, jotta se ei hauduta varvasta.
 - Laita suoja sille varattuun foliopussiin seuraavaan käyttöön saakka.

TOIMINTA:

Sinisten kynsien EPITHELIUMTACT 02 -suojaat koostuvat huippukestävästä 1 mm:n paksuisesta silikonigeelistä, jonka viskoelastiset ominaisuudet ovat lähellä ihon ominaisuuksia. Suojaat jakavat painetta ja absorboivat pieniä iskuja jakamalla energian geeliin, näin voidaan välttää kynsien muuttuminen siniseksi ja rakot. Ne vähentävät myös kipua ja näin urheilua voi jatkaa tehokkaasti.

HOITO:

Suojaat voi pestä vedellä ja saippualla. Älä hankaa niitä ja anna kuivua vapaasti.

KOOSTUMUS: 82% silikonia, 18% polyamidi/elastaanikangasta.

Tuote on käynyt läpi kaikki testit normin ISO 10 993-1 mukaan, joka koskee tuotteita, jotka ovat suorassa ihokontaktissa. Jos tästä huolimatta ongelmia, käyttöön on syytä lopettaa heti ja asiasta on ilmoitettava MILLET Innovation -yhtiölle.

MILLET Innovation ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä. Ranskan on viittaus kieli. Alkuperäinen CE-merkintä: 2014.

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pesu käsin. | <input checked="" type="checkbox"/> Ei silitystä tai höyryä. | <input checked="" type="checkbox"/> Ei kuivapesua. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ei klooria. | <input checked="" type="checkbox"/> Ei koneellista kuivausta. | <input checked="" type="checkbox"/> Katso pakkausta. |

NORSKepitact®
SPORT**BESKYTTELSPLASTER MOT BLÅ NEGLER**

EPITHELIUMTACT 02

INDIKASJONER: Beskyttelsesplaster mot blå negler.**KONTRAINDIKASJONER:**

- Må ikke brukes direkte på åpne sår.
- Spesielle forholdsregler for personer med årebetennelse, diabetes, nevropati i nedre ben eller åreknuter: Bruk aldri produktet på sår eller sårdannelse, følg med på foten under bruk og spør legen eller fotterapeuten din om råd.

FORHOLDSREGLER VED BRUK:

- Disse plastre skal brukes **forebyggende**. De egner seg også til godt bruk på negler som allerede er blitt blå.
- Plastre skal brukes på ren og tørr hud. Må vaskes før bruk.
- Sett plasteret mot ytterspissen av tåen med vrangen ut og rull det på tåen for lettere å få det på.
 - Forsøk ikke å klippe opp plasteret for å gjøre det kortere; dette gjør det mindre kraftig.
 - Ta av plasteret hver kveld for å unngå risikoen for maserasjon.
 - Oppbevar plasteret i den metalliske lommen til neste gang du skal bruke det.

FUNKSJONER:

Beskyttelsesplastre EPITHELIUMTACT 02 inneholder en svært bestandig 1 mm tykk silikongel med en viskoelastisitet som tilsvarer elastisiteten i huden. Når du bruker et av disse plastre, vil det fordele trykket og absorbere lette støt ved å ta opp energien i gelen og dermed forebygge all risiko for å få blå negler eller gnagsår hud. Plastre lindrer også smerte, slik at du kan fortsette treningen uhindret og yte på samme nivå som vanlig.

VEDLIKEHOLD:

Plastre kan vaskes med såpe og vann. Må ikke skrubbes. La tørke i friluft.

SAMMENSETNING: 82% silikon, 18% stoff av polyamid/elastan.

Materialene har vært gjenstand for alle reglementære tester i henhold til ISO-standarder ISO 10 993-1 som gjelder for produkter som vil komme i kontakt med huden. Dersom det likevel skulle oppstå et problem, slutt umiddelbart å bruke produktet og meld fra til selskapet MILLET Innovation.

Firmaet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig EU-merking: 2014.

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kan vaskes for hånd. | <input checked="" type="checkbox"/> Må ikke strykes eller dampes. | <input checked="" type="checkbox"/> Må ikke tørkes i tørketrommel. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Må ikke vaskes i klor eller klorrens. | <input checked="" type="checkbox"/> Må ikke tørkes i maskin. | <input checked="" type="checkbox"/> Se emballasjen. |

ΕΛΛΗΝΙΚΑepitact®
SPORT**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΥΧΙΩΝ**

EPITHELIUMTACT 02

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Προστατευτικά μελανων νυχιων.**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:**

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανοικτές πληγές.
- Περίπτωση ατόμων με αρτηρίτιδα, διαβήτη, νευροπάθεια των κάτω άκρων ή εξέλακωμα κίρσο: ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πληγή, διατροφική κάκωση. Ελέγχετε το πόδι κατά τη χρήση και ζητήστε συμβουλές από τον ιατρό ή τον ποδολόγο σας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Η χρήση των προστατευτικών είναι **προληπτική**. Είναι επίσης κατάλληλα για μελανά νύχια που έχουν ήδη σχηματιστεί.
- Τα προστατευτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Να πλυθεί πριν από την 1η χρήση.
- Για εύκολη εφαρμογή, τοποθετήστε το προστατευτικό ανάποδα, στην άκρη του νυχιού και στη συνέχεια ξετυλίξτε το σταδιακά.
 - Μην κόβετε το προστατευτικό, αυτό βλάπτει την ανθεκτικότητά του.
 - Αφαιρείτε το προστατευτικό κάθε βράδυ για την αποφυγή του κινδύνου εμβροχής.
 - Τοποθετήστε το προστατευτικό στην επιμεταλλωμένη σακούλα που προβλέπεται για το σκοπό αυτό μέχρι την επόμενη χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Τα προστατευτικά μελανών νυχιών EPITHELIUMTACT 02 αποτελούνται από ένα αυτοκόλλητο τζελ σιλικόνης πάχους 1 mm του οποίου οι ιεζυδοελαστικές ιδιότητες είναι παρόμοιες με αυτές του δέρματος. Τα προστατευτικά κατανέμουν την πίεση και απορροφούν τις μικρο-προσκρούσεις διαχέοντας την ενέργεια στο τζελ, αποτρέποντας έτσι κάθε κίνδυνο σχηματισμού μελανιών νυχιών ή φλυκταινών. Ανακουφίζουν επίσης από τον πόνο, επιτρέποντας τη συνέχιση της άθλησης με την ίδια αποτελεσματικότητα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Τα προστατευτικά πλένονται με νερό και σαπούνι. Μην τα τρίβετε και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 82% σιλικόνη, 18% ύφασμα πολυαμιδίου/ελαστικής.


Τα υλικά έχουν υποβληθεί σε όλες τις κανονιστικές δοκιμές που επιβάλλονται από το πρότυπο ISO 10 993-1 σχετικά με τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Ωστόσο, σε περίπτωση περιστατικού θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση, και να και να ενημερώσετε την MILLET Innovation.

Η εταιρεία MILLET Innovation δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο αντίθετο προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική σήμανση C: 2014.

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Πλένεται στο χέρι. | <input checked="" type="checkbox"/> Δεν σιδερώνεται, ούτε και με ατμό. | <input checked="" type="checkbox"/> Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό. | <input checked="" type="checkbox"/> Δεν στεγνώνεται στο στεγνωτήριο. | <input checked="" type="checkbox"/> Δείτε συσκευασία. |

PREVENTIVE PROTECTORSepitact®
SPORT**PROTECTIONS ONGLES BLEUS EPITHELIUMTACT 02**epitact®
SPORT

TOENAIL PROTECTORS / BLAUE-NÄGEL-SCHUTZKAPPEN / PROTEZIONE PER UNGHIE LIVIDE / PROTEÇÕES UNHAS NEGRAS / BESCHERMERS TEGEN BLAUE NAGELS / PROTECCIONES UÑAS MORADAS / TÅBESKYTTELSER MOD BLÅ NEGLE / BLÅNAGELSSKYDD / SINISTEN KYNSIEN SUOJAT / BESKYTTELSPLASTER MOT BLÅ NEGLER / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΥΧΙΩΝ

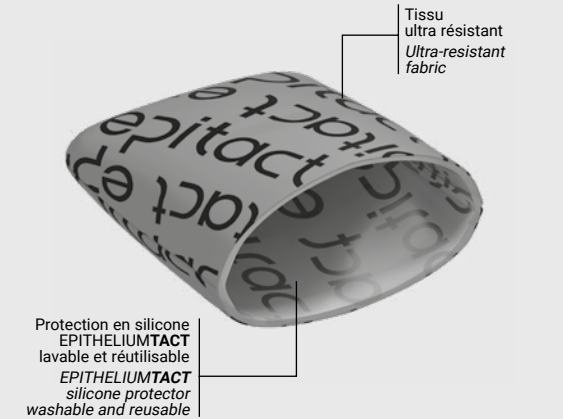

Protection en silicone
EPITHELIUMTACT
lavable et réutilisable
EPITHELIUMTACT
silicone protector
washable and reusable

ABSORPTION DES MICRO-CHOCES ET DES PRESSIONS
ABSORPTION OF MICRO-SHOCKS AND PRESSURE

DÉCOUVREZ
LA GAMME EPITACT® SPORT

DISCOVER
THE EPITACT® SPORT RANGE

www.epitact.com

19370-H_05/2023



Produit issu de la recherche MILLET Innovation.
Product designed by MILLET Innovation R&D.

MILLET INNOVATION
ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCE
contact@epitact.com
www.epitact.com

